



10 штук

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ




Мягкие
сменные
насадки



Годен до:

Серия №:

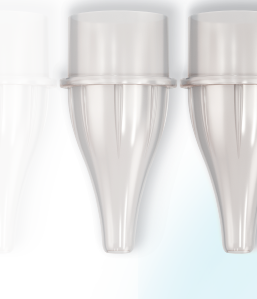

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
НОСИКА МАЛЫША

Отривин
Бэби
Комфорт

HALEON

Комфорт
Насадки сменные для
аспиратора назального (мягкие)

10 штук

Отривин
Бэби

Насадки сменные для аспиратора назального "Отривин Бэби Комфорт" (мягкие) – 10 шт. Храните в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке. Храните при температуре от 0 °С до 30 °С. Срок годности 3 года.

Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке. Медицинское изделие, рег. удостоверение №ФСЗ 2008/01134 от 21.05.2026.

Место производства: Стипластикс, 62 Чемин дес Плантес, 38160 Сен-Марселлен, Франция.

Produced by Stiplastics, 62 Chemin des Plantees, 38160 Saint-Marcellin, France.

Производитель: Хелеон КХ САПЛ, Рю де Летраз, 1197 Пранжен, Швейцария.

Legal Manufacturer: Haleon CH SARL, Route de l'Etraz, 1197 Prangins, Switzerland.

Организация, принимающая претензии на территории Российской Федерации:

АО «Хелеон Рус», Российская Федерация, 123112, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10, помещ. III, комната 9, эт 6.

Тел.: +7 (495) 777-98-50;

Телефон бесплатной «Горячей линии»:

8 (800) 333-46-94

Эл. почта: rus.info@haleon.com

В упаковке содержатся десять мягких одноразовых насадок с абсорбирующим фильтром для использования с аспиратором назальным "Отривин Бэби Комфорт", который приобретается отдельно. Анатомическая форма насадки позволяет легко установить ее в носовой ход ребенка, исключая травмирование. В каждой насадке содержится абсорбирующий фильтр, задерживающий слизистые выделения, что обеспечивает чистое и гигиеничное использование.




Насадки сменные вместе с аспиратором назальным "Отривин Бэби Комфорт" используют у детей (новорожденных, младенцев и детей младшего возраста) для бережного удаления слизистых выделений из носа. Удаление слизистых выделений помогает предотвратить дальнейшие осложнения, например, ушные инфекции (отит), инфекции носовых пазух (синусит) и кашель.

Для облегчения процедуры перед использованием назального аспиратора "Отривин Бэби Комфорт" рекомендуется промыть нос физиологическим раствором, например, каплями "Отривин Бэби". Не используйте изделие при наличии аллергии на материал любого из компонентов изделия.

Используйте сменные насадки только с соответствующим аспиратором, поставляемым производителем отдельно.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением аспиратора и сменных насадок после травмы носа или недавно перенесенного хирургического вмешательства в полости носа.

Состав: поливинилхлорид, меламиновая пена.

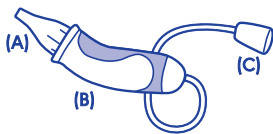

Способ применения:

1. Перед и после использования аспиратора тщательно вымойте руки.
2. Присоедините сменную насадку (А) к центральной части корпуса (В) аспиратора. Не используйте бывшую в употреблении насадку.
3. Возьмите мундштук (С) в рот и вставьте конец насадки (А) в один из носовых ходов ребенка.
4. Медленно и аккуратно втягивайте воздух ртом при помощи равномерных вдохов через мундштук (С).
5. Если насадка заполняется выделениями во время аспирации, замените ее, не используйте насадку повторно.
6. Повторите процедуру для другого носового хода.
7. Отсоедините и выбросьте использованную насадку (А). Протрите внешнюю поверхность мундштука (С) чистой смоченной в теплой воде тканью, просушите салфеткой. В случае попадания слизи внутрь корпуса (В) отсоедините силиконовую трубку, промойте корпус теплой водой и осушите его, прикрепите трубку обратно.

Не используйте сломанное или поврежденное изделие или насадку с отсутствующим или поврежденным фильтром. Проводите аспирацию у ребенка в положении лежа или полулежа, надежно удерживая мундштук между губами. В целях соблюдения гигиены и для исключения повторного инфицирования насадки следует использовать лишь однократно.