


Order – AWF	AWF 28971 – OTDC 480722
Reference	OTRIVIN SPRAY SOLUTION SEA WATER 50-100 ML HK_941021_PIL
Format	135 x 200 mm – Recto/Verso
Pharma code	–
Colour	P Reflex Blue U
Font	Helvetica Neue LT Pro – Hiragino Kaku Gothic ProN – Text outlined
Font min. size	Text body: 8 pts
Reference MKT	–
Production site	SPPH – FR
Reference SITE	ANA90NC02B
Pre-press	Diadeis Suisse SA – AL – DO-18-E0299 – 14.03.2018 – F27

Recto
135 mm

200 mm



Otrivin® Seawater isotonic solution for daily nasal cleaning.

Properties:
Otrivin® Comfort Seawater Spray is a sea water isotonic solution which is microbiologically pure, without preservative and naturally rich in sea microelements. It moisturizes the nasal mucosa when it is dry and crusty, washes away nasal secretions in case of nasal colds and blocked nose, aids comfortable breathing. Suitable for use in adults and children* for daily nasal cleaning.

Indication

- Washing of nasal cavities.
Washes away nasal secretions in case of nasal colds and blocked nose, aids comfortable breathing.
- Moisturizing of the nasal mucosa.
Moisturizes to keep the mucosa in very good hydrating condition. Improves the drying condition due to temperature change.
- Protecting of nasal mucosa from the irritation.
Protects the mucosa from irritating action of air pollution & sources of allergy.

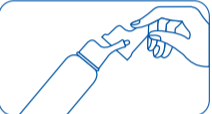


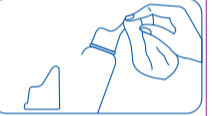
**Abundant mucus production is very frequent in infancy: nasal obstruction, rhinorrhea, but also coughing and vomiting are the most common signs. In these situations child has difficulty in breathing, is irritable and restless, has problems to eat and sleep. Moreover, if the problem is neglected, more serious complications such as sinusitis and otitis may arise.*

Components:
100 ml of solution contain: sea water 31.82 ml purified water up to 100 ml
Inert propellant gas: nitrogen
(Nitrogen is not a component of the solution but acts only as propeller and does not exit the bomb).
It contains no preservatives or medical ingredient.

Frequency of use:
Otrivin® Seawater may be used at any time of the day and in any position. Washing of nasal cavity associated with nasal colds and allergy symptoms: as needed at various time a day. For daily nasal cleaning: 1-2 times a day or more as needed.

Instructions for use:

1. Remove the protective cap.
2. Place the nozzle at the base of the nostril.
3. Exert a light pressure at the nozzle's base*.
4. Repeat the procedure in the other nostril*.
5. After use, clean and dry the nozzle and put the protective cap back on.

* press for 1 sec or longer as needed


Warning:
Contents under pressure: keep away from direct sunlight and do not expose to temperatures over 50°C. Do not puncture or burn it, even after use. Keep out of the reach of children. Refrain from use in case of hypersensitivity to any of the product's components. Use the product exclusively for the application it was intended. Do not use product after its expiry date. The expiry date refers to the product when properly stored.

CE 0459

Information updated: August 2016

安鼻靈 and Otrivin are trade marks owned by or licensed to the GSK group of companies.
© 2016 GSK group of companies or its licensor. All rights reserved.

HK 941021
ANA90NC02B



7 mm
7 mm

7 mm
7 mm



Order – AWF	AWF 28971 – OTDC 480722
Reference	OTRIVIN SPRAY SOLUTION SEA WATER 50-100 ML HK_941021_PIL
Format	135 x 200 mm – Recto/Verso
Pharma code	-
Colour	P Reflex Blue U
Font	Helvetica Neue LT Pro – Hiragino Kaku Gothic ProN – Text outlined
Font min. size	Text body: 8 pts
Reference MKT	-
Production site	SPPH – FR
Reference SITE	ANA90NC02B
Pre-press	Diadeis Suisse SA – AL – DO-18-E0299 – 14.03.2018 – F27

Verso
135 mm

200 mm



每天清潔鼻腔的安鼻靈®潔鼻海泉。

產品特點：
安鼻靈®防敏潔鼻噴霧是一種等滲壓式的無菌海水溶液，含天然微量元素及豐富海洋營養，不含防腐劑。它能濕潤乾硬的鼻膜，清洗因傷風或鼻塞引致的分泌物，促進呼吸暢順。適合成人及兒童*每天潔鼻使用。

功效：

- 清洗鼻腔
清洗因傷風或鼻塞引致的分泌物，促進呼吸暢順
- 濕潤鼻膜
維持鼻腔最佳濕度，改善因氣溫改變而引致的黏膜過乾
- 保護鼻膜，免受刺激
減低鼻膜受空氣中的污染或致敏原的刺激

* 嬰兒時常會因過量的黏液分泌而引致鼻塞、流鼻涕，但亦有咳嗽及嘔吐等常見的症狀。在這些情況下，兒童會呼吸困難、急躁、焦躁不安，也會有進食和睡眠問題。此外，若忽視問題，可引致更嚴重的併發症如鼻竇炎和耳炎。

成分：

- 每100毫升溶液蘊含31.82毫升的海水，其餘為純水
- 驅動氣體：氮氣(氮氣非溶液成分，只留在罐內作驅動而不漏出壓縮罐)
- 不含藥性、不含防腐劑

用法：
可以任何時候、任何姿勢使用安鼻靈®潔鼻海泉。

- 當受傷風或過敏症狀時：
按情況所需每天潔鼻數次。
- 平常護理：每天使用1-2次或按個人所需。

使用步驟：







1. 打開保護蓋

2. 將噴咀輕放於鼻孔底部

3. 按壓噴咀於鼻孔噴1次#

4. 於另一個鼻孔重複1次#

5. 於每次使用後，請清潔及弄乾噴霧器

維持1秒，若有需要可延長噴霧時間

注意：
壓縮氣體，遠離50度或以上高溫及陽光。用完後之氣罐切勿刺穿或燒毀。如對產品成分出現過敏現象，請即停止使用。避免兒童觸及。請按建議使用產品。過期後切勿使用。有效日期請查閱產品包裝。

此產品為歐盟註冊：CE 0459

資料更新：2016年8月

安鼻靈及Otrivin均為葛蘭素史克集團擁有或獲許可使用之商標。
© 2016 葛蘭素史克集團或其許可人。
保留一切權利。

7 mm
7 mm

HK 941021
ANA90NC02B

Approvals

Version:

Name	ID	Type	Reason for Signature	Date

Document electronically signed